

Frekans Uygulamaları ile İlk Adımların!

Yeni Healy World ürününü satın aldığın için tebrikler!

Bugünden itibaren bütünsel sağlık ve esenliğe doğru yeni bir yola çıktın. Şu an itibarıyla seni ve esenlik hedeflerini desteklemek için çok sayıda frekans uygulaması her zaman hizmetinde olacak.



FREKANS UYGULAMALARI BASİTTİR!

Healy World Bilişim Ltd. ŞTİ.

Kozyatağı Mah. Çardak Sk.

Herti Plaza A1

İstanbul | Turkey

www.healy.world | contact@healy.world

İçin rahat olsun: Frekans uygulamalarını kullanırken asla yanlış bir şey yapamazsın (talimatlara uyduğun ve Kullanma Kılavuzundaki kontrendikasyonları izlediğin sürece çok kolaydır!) Küçük yardımcının temel işleyişini öğrendiğinde, onunla ilk deneyimini kazanmak çocuk oyuncağıdır.

Healy ve MagHealy, Biyoenerjetik Alanını uyumlu hâle getirmek için bir dizi Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ve Kuantum Analizli Frekanslar (QAF* programları içerir.

* "Individualized Microcurrent Frequencies (IMF)" ve "Kuantum Analizli Frekanslar" ("QAF") Healy World'ün tescilli teknolojileridir. Profesyonel kullanıcı deneyimlerine göre kullanıcı için en yüksek öneme sahip olduğu görülen frekanslara bir öncelik atamak için fiziksel bir gürültü üreticinden gelen verileri kullanırlar.


Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ve Kuantum Analizli Frekanslar (QAF) programlarının süresi, frekansları, yoğunluğu, sıklığı, adlandırılması ve açıklamaları, uzmanların pratik deneyimlerine ve frekans modülasyonlu manyetik alanların Biyoenerjetik Alan ile etkileşimine dair anlayışımıza dayanmaktadır. Bunlar, bağımsız çalışmalarla teyit edilmemiştir.

Healy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ve MagHealy Kuantum Analizli Frekanslar (QAF) programları, Biyoenerjetik Alanın uyumlaştırılması yoluyla esenliği desteklemek için tasarlanmıştır. Kontrollü ve rastgeleştirilmiş katılımcı gruplarında kör olmayan önce/sonra anketleri gerçekleştirdik. Bu anketler, uygulama sonrasında katılımcıların sıhhat düzeyinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu, yaşam enerjisi akışı olarak adlandırdığımız ve geleneksel olarak chi (veya qi) ve prana olarak da bilinen Biyoenerjetik Alanın uyumlaştırılmasına bağlıyoruz. Bu durum, bağımsız çalışmalarla teyit edilmemiştir.

Peki doğru program nasıl seçilir?

Öncelikle şunu bilmelisin: Hiçbir program "yanlış" değildir - hepsi doğru programlardır! Sana en uygun programı bulmak için üç farklı seçeneğin var:


SEÇENEK 1

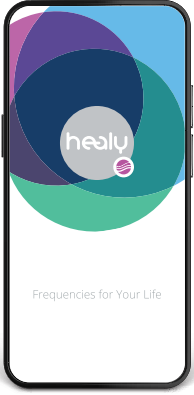

İlk seçenek, adı ve açıklaması açısından mevcut ihtiyaçlarına karşılık gelen bir program seçmektir. Açıklamalar, Healy Uygulamasının Bilgi Merkezindeki Uygulama kılavuzunda bulunabilir.


Örneğin, büyük bir gerilim altındaysan Rahatlık programını seç. Birkaç program, adı veya tanımı dolayısıyla uygun gözüküyorsa bunları sırayla veya birbiri ardına kullanabilirsin.

SEÇENEK 2

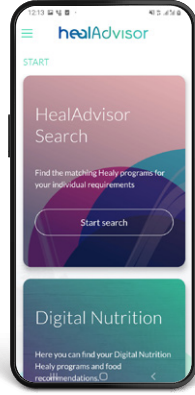

İkinci seçenek ise Uzman Ekibimizin köklü deneyimine ve milyonlarca Healy uygulamasına erişmeni sağlayan HealAdvisor Uygulamasını kullanmaktır. HealAdvisor Uygulaması, sana arama terimin için arama önerileri gösteren ve daha sonra seçebileceğin kullanışlı ve kapsamlı bir arama işlevi sunar. Başarılı bir aramadan sonra, sana bir uygulama planı da oluşturabileceğin programlar önerilir.

SEÇENEK 3

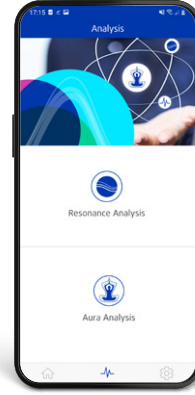

Üçüncü seçenek ise HealAdvisor Analize Uygulamasının Rezonans modülünü kullanmaktır. Bu modülde, şu anda hangi programlarla en yüksek rezonansa sahip olduğunu analiz edebilirsin. Görüyorsun ki: Frekans uygulamalarını kullanmak gerçekten çok kolay! Bunun, talimatlara dikkat ettiğin ve Kullanma Kılavuzundaki kon-trendikasyonları izlediğin sürece geçerli olduğunu tekrar etmekte fayda var. En sevdiğin programları bu üç seçenekten biri veya birkaçı yoluyla bulduğunda, bunları (herhangi bir sırayla) dilediğin zaman, gerektiğinde veya düzenli olarak kullanabilirsin.



Frekans uygulamalarının etkilerini optimize etmek için birkaç değerli ipucu:

- Günde en fazla üç frekans programı kullan.
- Healy'yi kullanırken yeterince su iç. Frekans uygulamasından önce 1 bardak ve uygulamadan sonra 2 bardak su içilmesini öneriyoruz.
- Akıllı telefonundaki uygulamayı kullanarak program yoğunluğunu ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarla. Azı karar, çoğu zarar olduğunu unutma!
- Bir programı çalıştırdıktan sonra akıllı telefonunu bir kenara koyabilir, uçuş moduna alabilir veya tamamen kapatabilirsin; Healy veya MagHealy cihazı programı çalıştırmaya devam edecektir! Yalnızca yeni bir program seçmek veya başlatmak istediğinde veya programın yoğunluğunu değiştirmen gerektiğinde telefonuna ihtiyacın olacak.
- Frekans uygulamaları sırasında rahatlamalısın, belki sevdiğin bir müziği dinleyebilirsin. Vücudun, farklı frekanslardan gelen bilgileri işlemek ve tetiklenen süreçleri gerçekleştirmek için belirli bir zamana ihtiyaç duyduğundan, uygulamadan en iyi şekilde yararlanmak için uygulamadan sonra kendine başka herhangi bir etki olmadan 2 saat vermeni öneririz.

O hâlde şimdi bize sadece şunu söylemek kalıyor:

Yeni Healy veya MagHealy ile her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor, hepinize başarı dileklerimizi sunuyoruz!

Uyarılar: Healy cihazının Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programları ve MagHealy cihazının manyetik alan programları tıbbi uygulamalar değildir. Bunlar herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek, teşhis etmek veya önlemek üzere tasarlanmamıştır. Programlarda kullanılan terimler, bu programların etkilerine dair kesin beyanlar olarak görülmemelidir. Bu programların amacı, kullanıcıya uygulama seçeneklerini keşfetmesi için bir araç sağlamaktır. Healy veya MagHealy programları profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerine geçmemelidir. Bu tür tavsiyeleri her zaman nitelikli bir tıp uzmanından almalısın. Bir sağlık problemin varsa veya sağlık problemin olduğundan şüpheleniyorsan veya bir sağlık uzmanının bakımı altındaysan Healy veya MagHealy kullanmadan önce uzmanına danışmalısın. Healy veya MagHealy'ni her zaman Kullanım Talimatlarına göre kullan.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Healy cihazının Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programları ve MagHealy cihazının manyetik alan programları, geleneksel tıp anlamında bilimsel kanıt eksikliği nedeniyle geleneksel tıp tarafından kabul edilmemektedir.

Bu sayfalardaki bilgiler, yalnızca referans ve eğitim amaçlıdır. Healy World bu sayfalarda yer alan bilgileri güncel tutmak için çaba gösterirken, bilgilerin doğruluğu, uygunluğu veya güncelliği ile ilgili hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır. Healy World, bu sayfalarda verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan veya hasardan sorumlu değildir. Tüm bilgiler "olduğu gibi" esasına göre sunulmakta olup bunların yorumlanması ve kullanılmasına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca kullanıcıya aittir. Healy World ürünlerinin, programlarının veya bilgilerinin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve kullanıcının takdirine ve hür düşüncesine bağlıdır. Healy World şirketleri, Kullanım Talimatları ve şirket tarafından sağlanan kılavuzun kapsamı dışında kalan Healy World ürünleri veya hizmetlerinin kullanımıyla ilgili kullanıcı kararları için özellikle sorumluluk kabul etmemektedir.